


# Méropénem pour injection dans le système d'administration DUPLEX® de B. Braun

Conçu pour économiser temps, main-d'œuvre et ressources.

Les contenants DUPLEX à deux compartiments prêts à l'emploi conservent séparément le médicament et le diluant prémesurés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les mélanger et à les administrer.

## Conçu à des fins de sécurité et de commodité

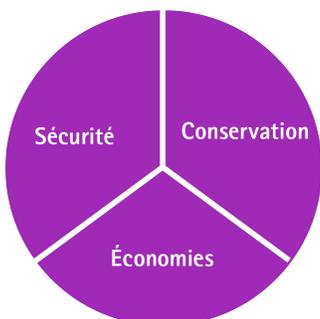

- **Sécurité:** Conçu pour éviter l'administration du diluant sans le médicament
- **Économies:** Élimine le besoin d'adaptateurs pour fioles et réduit la charge de travail associée à la préparation des médicaments
- **Conservation:** Se conserve à la température ambiante sur les unités de soin et à une date de péremption de 36 mois.

# Système d'administration de médicaments DUPLEX®



## Aucune attente

Le contenant à deux compartiments prêt à l'emploi permet de conserver séparément le médicament et le diluant prémesurés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les mélanger et à les administrer



## Faire plus avec moins


Pas besoin de seringues, de fioles ou d'étapes supplémentaires pour vous ralentir, nous vous aidons à économiser du temps, des ressources et de la main-d'œuvre



## Protection des patients

Ce système fermé est conçu pour éviter la contamination, préserver la concentration du médicament et s'assurer que le diluant ne peut être administré sans le médicament

# Contenant à deux compartiments

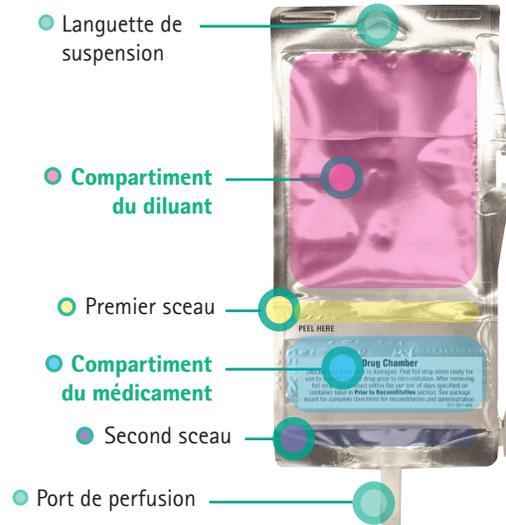

## Renseignements pour commander

Produit	Concentration	DIN	Code de produit	Un/Cs
Méropénem pour injection USP et chlorure de sodium injectable USP	500mg	02544334	3183-1100	24
Méropénem pour injection USP et chlorure de sodium injectable USP	1G	02544342	3185-1100	24

## Prêt quand vous l'êtes



### «RETIRER»

Retirer la bande d'aluminium du compartiment du médicament.



### «ROMPRE»

Plier le contenant juste en dessous de la ligne de démarcation du diluant et presser jusqu'à ce que le sceau entre le diluant et la poudre du médicament se rompe.




### «AGITER»

Agiter soigneusement le diluant et la poudre pour bien les mélanger.



### «ROMPRE»

Presser le contenant plié juste en dessous de la ligne de démarcation de la solution pour rompre le second sceau et libérer le liquide dans le port de perfusion.

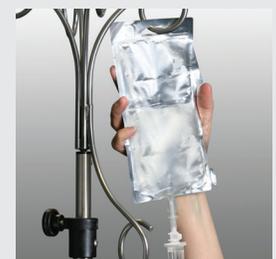

### «COMMENCER»

Retirer la languette en aluminium du port de perfusion et perforer le sac. Accrocher le sac à une tige à soluté.

Veuillez consulter la monographie du produit pour obtenir les directives d'utilisation et les renseignements thérapeutiques complets.